
良好的清洁可确保准确且可重现的结果。

基本建议
清洁不当是测量结果不正确的首要原因。

确保测量池中不残留之前测量的样品或冲洗液。之前测量产品的沉积物并非总是可见。例如，测量含油脂的产品时，测量池上可能会沉积一层很薄的油膜。
因此，测量后立即清洁并随后进行检查测量尤为重要。
应根据测量样品选择合适的清洁溶剂。为节省后续干燥时间，使用两种不同溶剂清洁可能是有益的。使用自动进样器时，这一点可能尤其重要。用新样品置换之前的样品也是一种常用的节时方法。

清洁：通过注射器或蠕动泵，用适当的介质冲洗振荡 U 形管系统。之后只需按下按钮，干燥单元即可清除全部液体残留。也可以配置采用半自动或全自动干燥的清洁程序。

提示：通过一次测试测量，可以判断 U 形管振荡器是否清洁且干燥。在 20 °C 和正常大气压下，干燥空气的测量值应约为 0.0012 g/cm³。

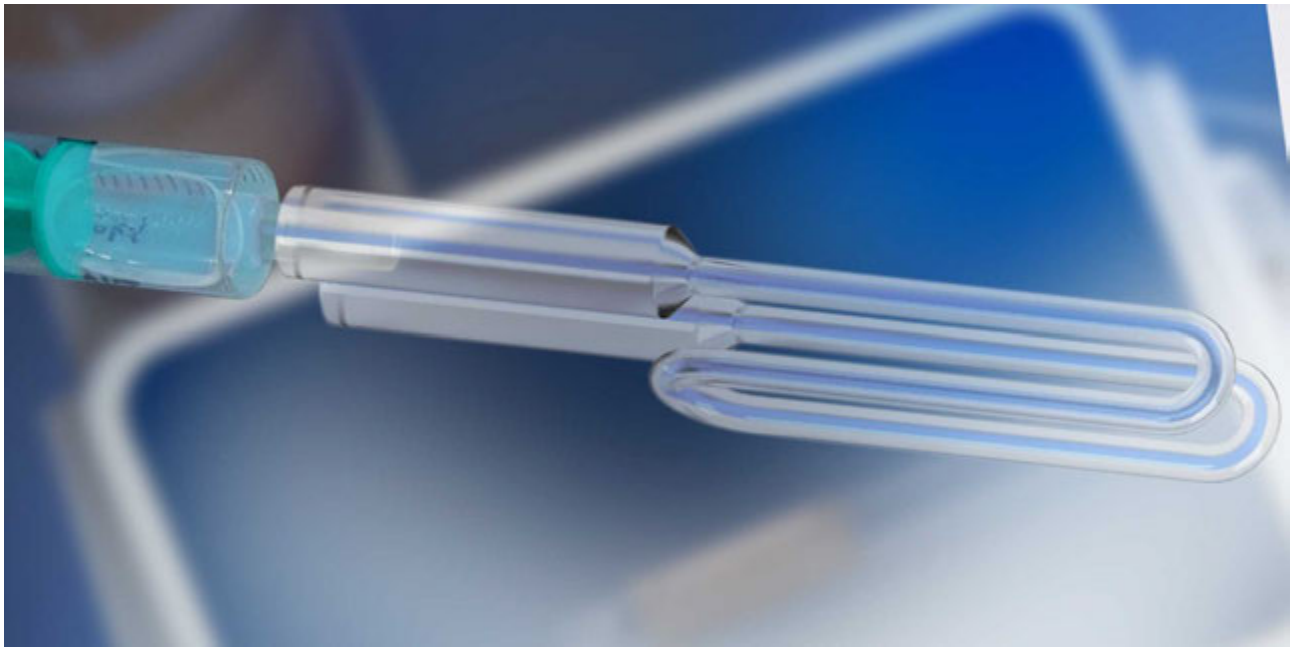

AI翻译，仅供参考



推荐的清洁剂
使用以下清洁剂，我们取得了最佳清洁效果：

样品	清洁剂1	清洁剂2
行业：食品、饮料和酒类		
果汁	水	乙醇
软饮料	水	乙醇
沙拉酱、蛋黄酱	清洗汽油	乙醇
啤酒、麦芽汁	水、酶型实验室 清洁剂（3 % Mucasol）	乙醇
烈酒	乙醇	---------
行业：化工、化妆品和制药		
香精、香料、香水	乙醇、异丙醇	---------
洗发水	水	乙醇
洗涤剂、液体皂	水	乙醇
防晒乳液	清洗汽油	乙醇
聚酰胺、聚合物	甲酚	---------
石蜡类物质	甲苯	二甲苯、清洗汽油
松节油基木材 防腐剂	清洗汽油	乙醇
水基木材保护剂	水	乙醇
行业：石油化工		
发动机油、润滑油	清洗汽油	丙酮
制动液（乙二醇）	二甲苯	---------
柴油、石蜡、航空燃料 和取暖油	清洗汽油、石油醚	丙酮

AI翻译，仅供参考