
折光仪正确清洁指南

良好的清洁可确保准确且可重现的结果。

基本建议

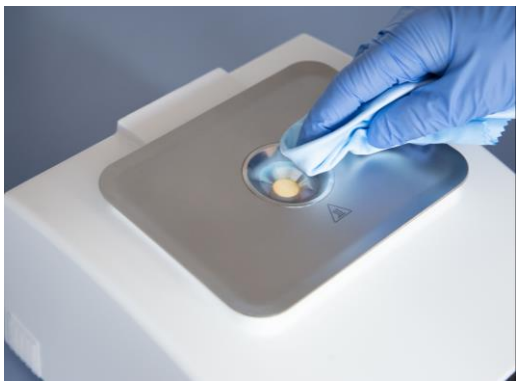

- 清洁测量棱镜时，通常使用柔软的、最好不掉纤维且吸水的纤维素擦拭垫即可。
- 先用擦拭垫吸去样品，再用湿润的擦拭垫擦拭。多数情况下，水是合适的溶剂。
- 对于油性样品，我们建议使用异丙醇（2-丙醇）。
- 每次使用后立即清洁测量棱镜。这可确保样品不会在棱镜上干燥或硬化。若不及时清除已干燥的样品，之后的清洁会更加费时。

酸性和碱性样品



- 在测量性质差异很大的样品之间，用水或其他合适的参比物进行一次测试测量，有助于检查清洁效果。（这同样适用于所有类型的折光仪。）

- 任何折光仪最重要的部件都是测量棱镜。测量腐蚀性样品后，请迅速清洁测量棱镜，之后检查是否干净。

- 此外，快速测量腐蚀性样品也可缩短接触时间。

添加样品和清洁剂

使用移液管或微量移液器添加样品和清洁剂。



- 对于带测量池的折光仪，可将样品小心地加入测量池。

- 避免产生气泡，因为气泡会使测量结果失真。

AI翻译，仅供参考



推荐的清洁剂
使用以下清洁剂，我们取得了最佳清洁效果：

样品	清洁剂1	清洁剂2
行业：食品、饮料和酒类		
果汁	水	乙醇
软饮料	水	乙醇
糖溶液、盐溶液、蜂蜜	水	---
啤酒、麦芽汁	水	乙醇
烈酒、馏出物	水	---
行业：化工、化妆品和制药		
香精、香料、须后水、香水	乙醇、异丙醇	---
AdBlue	水	---
洗涤剂	水	乙醇
乙二醇、丙二醇	水	乙醇
聚酰胺、聚合物	甲酚	---
石蜡类物质	清洗汽油	二甲苯
松节油基木材防腐剂	清洗汽油	乙醇
水基木材防腐剂	水	乙醇
行业：石油化工		
发动机油、润滑油	清洗汽油	丙酮
矿物油	异丙醇	---
柴油、石蜡和取暖油	清洗汽油、石油醚	丙酮

AI翻译，仅供参考