1 标称熔融温度

参考物质是熔点测量仪器正确校准与调整的必要条件。世界卫生组织（WHO）为此推荐了多种参考物质。
- 参考物质的熔融温度取自《国际药典》第11版。
- 《国际药典》可在以下网址查阅：
- https://www.who.int/teams/health-product-policy-and-standards/standards-and-specifications/norms-and-standards-for-pharmaceuticals/international-pharmacopoeia
- 这些参考物质适用于采用毛细管法测量的熔点仪（如 M3000 和 M5000）。
- 请注意：参考物质的准确熔融温度应始终以随附证书为准。这些数值与批次有关，可能与所列熔融温度存在差异。
- 熔融温度清单应理解为预期熔融温度的大致指南。


物质	熔融范围 / °C
偶氮苯	68,9
香兰素	83,2
联苯甲酰	95,9
乙酰苯胺	115,7
非那西丁	136,0
苯甲酰苯胺	164,7
磺胺	165,9
磺胺吡啶	192,7
双氰胺	210,2
糖精	230,0
咖啡因	237,2
酚酞	263,1





AI翻译，仅供参考

自动熔点测定——准确、快速、可靠

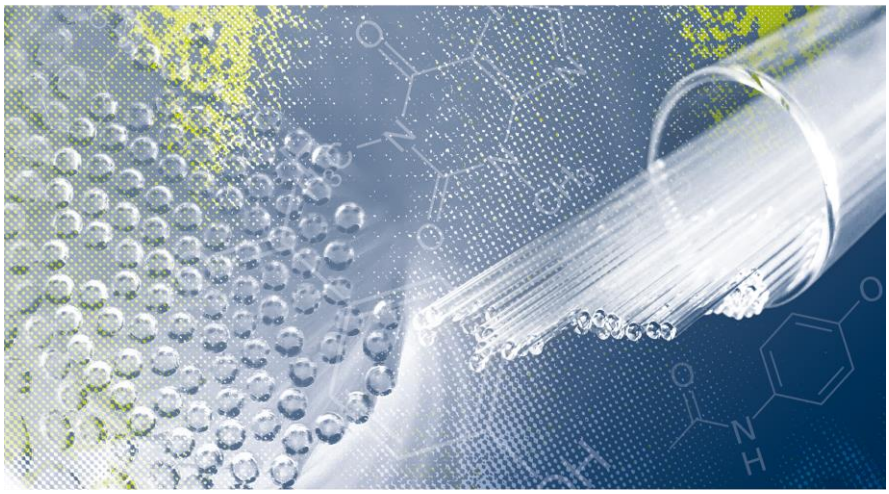

探索 A.KRÜSS 测量产品

向我们的专家学习！

我们针对多种分析方法和每一款设备提供全面的专业信息：进一步了解样品制备与测量、正确的清洁程序、相关规范和指南，或通过实时视频演示了解我们仪器的功能和特点。

了解我们的知识平台



在线了解我们的设备。只需点击即可！

我们在您的现场或通过汉堡工厂的直接视频会议演示产品。

实时体验我们的设备，并直接与专家交流。

AI翻译，仅供参考